




Electric Double Breast Pump

— User Manual —

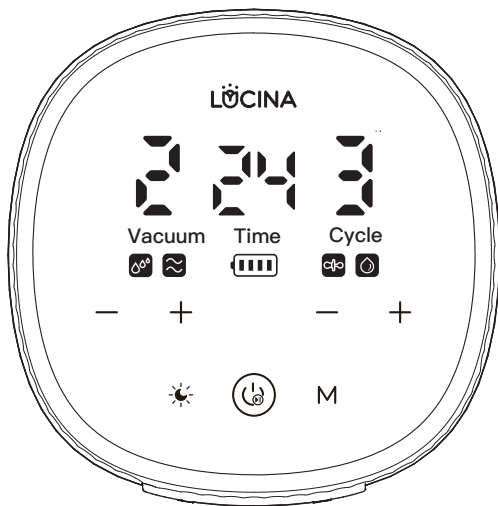

LED display · Four mode switch ·
Anti-back flow design · Lithium battery

COMPONENTS

Please check the following accessories before use, if there are missing or damaged pieces, please contact the supplier.

	Component Name	Materials	Operating Temperature	Sterilization Instruction
a	Upper cover	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Rinse in water/must dry out before using
b	Diaphragm	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	
c	Pump body	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Boiling water/Microwave/Dishwasher/UV safe
d	Flange (24 mm)	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Rinse in water/must dry out before using
		PS	-40°C/-40°F~149°C/300°F	
e	Flange Insert (17/19/21mm)	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	Rinse in water/Not suitable for prolong sterilizing
f	Duckbill valve	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	
g	Bottle cover	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Boiling water/Microwave/Dishwasher/UV safe
h	Nipple	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	Rinse in water/Not suitable for prolong sterilizing
i	Screw cover	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Boiling water/Microwave/Dishwasher/UV safe
j	Bottle	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	
k	Motor	/	/	Wipe with soft duster
l	Air tube connector	/	/	
m	Air tube	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	
n	Charging Cable	/	/	




HOW TO ASSEMBLE


Before use ensure your hands and the breast pump are cleaned.




1. Push the silicone duckbill valve onto the pump body.

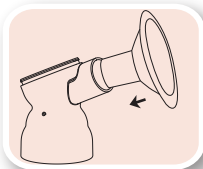

2. Attach the flange onto the pump body.

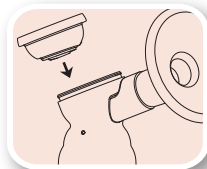


3. Put the diaphragm into the pump body.

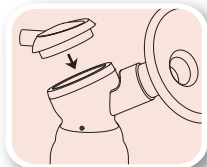


4. Screw the diaphragm cover onto the pump body.




5. Screw bottle into the pump body.

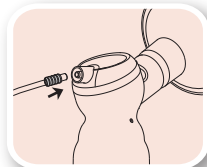

6. Connect both ends of the air tube with tube connector. Insert one end of the connector into the diaphragm cover.

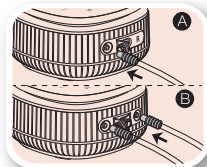

7. Single/Double sides switch: (A) insert one tube into one side and block the other side to use single pump; (B) insert tubes into both side to use double pump. (Note: Make sure air tube connector is correctly and fully inserted into motor)

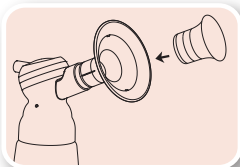

8. 17/19/21 Flange insert is only suitable for use with 24mm Flange. Use a ruler or nipple measure card to find the right flange size.



9. After finishing pumping please store your breast milk in the refrigerator, then keep the electric parts dry.


Do not fill the bottle with too much milk, cannot pass the maximum capacity of the bottle, if too much milk in the bottle, milk will flow from the bilateral porosity of the pump body, please turn off the machine and stop sucking, replace the bottle to continue sucking. If you find it pass current bottle, please replace larger bottle.

For convenience, we especially equipped 2 extra wearable cups in the package. And the following part illustrates the components and assembling procedures of the equipped wearable cups.

COMPONENTS OF WEARABLE CUPS

Please check the following accessories before use, if there are missing or damaged pieces, please contact the supplier.

	Component Name	Materials	Operating Temperature	Sterilization Instruction
(a)	Flange Insert (21/24mm)	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	Rinse in water/Not suitable for prolonged sterilization
(b)	Breast shield (28mm)	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Boiling water/Microwave/Dishwasher/UV safe
		PS	-20°C/-4°F~149°C/300.2°F	
(c)	Duckbill valve	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	Rinse in water/Not suitable for prolonged sterilization
(d)	Collection cup (150mL/5oz)	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Boiling water/Microwave/Dishwasher/UV safe
		PS	-20°C/-4°F~149°C/300.2°F	
(e)	Diaphragm	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	Rinse in water/Not suitable for prolonged sterilization
(f)	Cover	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Rinse in water/must dry out before using

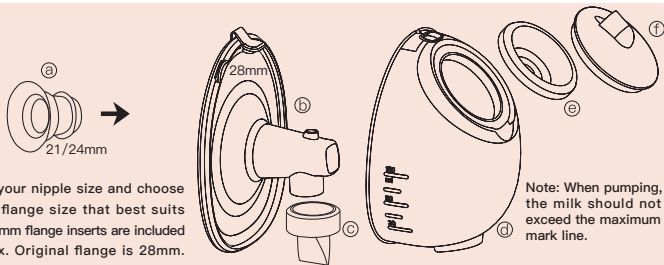


HOW TO ASSEMBLE THE WEARABLE CUPS


Before use ensure your hands and all breast pump parts are cleaned and dried.




Installation Video

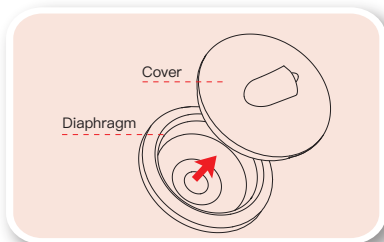


1. Put diaphragm into the upper cover, make sure there is no air leaking.

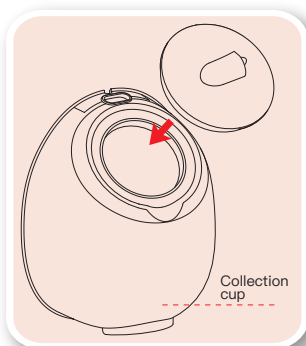

2. Press the installed upper cover onto the collection cup to ensure it fits in place.

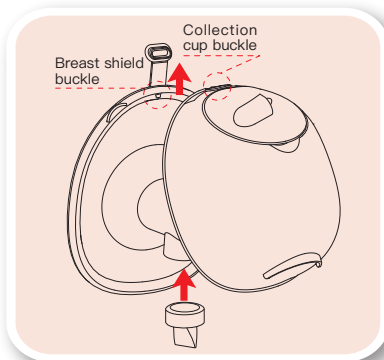


3. Push silicone duckbill valve onto the breast shield. Buckle up breast shield and collection cup on the top.

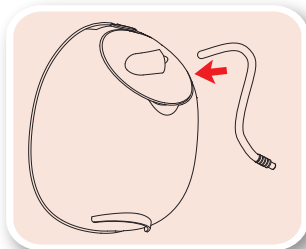

4. One end without the tube connector is inserted into the collection cup while the other end with connector is inserted into the motor.

DISPLAY AND BUTTONS

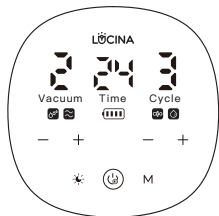

Button use instruction

	On/Off Button	Long press to turn on/down. Short press to pause. The pump will automatic shut down after pause over 10 minutes.
	Mode switch button	Default multitronic mode "M" when device everytime turned on. Short press to switch modes.
	Night Light	When turn on the device, short press to turn the light on/off.
	Vacuum Adjust(left)	1 to 9 levels to adjust suction power
	Cycle Adjust(right)	1 to 5 levels to adjust suction frequency

Display Instruction

	Battery indicator	"" This symbol is flashing means the products should been charged as soon as possible. The device will auto shut down when the power is too low. The symbol will light up one by one while charging. Three symbols keep bright means the charge is finish and power is full.
 Vacuum	Level display	1 to 9 levels
 Time	Time display	The device will auto shut down when it keep work for 30 minutes.
 Cycle	Cycle display	1 to 5 levels
	Multitronic Mode	Variable frequency to get MORE milk.
	Massage Mode	Gentle STIMULATION to get milk flow.
	Suck Simulate Mode	Simulate NATURAL SUCKING of baby.
	Express Mode	Slow and deep sucking to EMPTY OUT .

FUNCTION FEATURES

The **vacuum level** and cycle speed can be adjusted independently by pressing “ — + ” button on the screen of the motor.

There are two groups of “ — + ” buttons on the screen.

The left side is to adjust the vacuum level and the right side is to adjust the cycle speed.

Vacuum Suction Setting—Adjust the vacuum level by pressing the “ — + ” button on the left side of the motor.

The vacuum suction level describes how aggressively the pump will “suck”; a higher number indicates more vacuum. Please be careful when setting the vacuum level on this breast pump. The pump has 1~9 vacuum suction settings. Some women may feel that higher vacuum levels promote faster milk expression. It is advised that you start with a low vacuum level and gradually increase it to a comfortable level because it is crucial to avoid setting the vacuum level so high that it causes discomfort, as this can affect your milk flow. You may discover that the level of vacuum that you are comfortable with varies greatly from day to day, throughout the day, and even during the same expression session.

Cycle Speed Setting—Adjust the cycle speed by pressing the “ — + ” button on the right side of the motor.

The cycle speed is measured in CPM (cycles per minute) on your breast pump and refers to how many times the pump “suckles” and releases per minute. This breast pump has been designed with 1~5 cycle speeds so that you can find the setting that suits your body best. For some women, altering the cycle speed can have a significant impact on their ability to express themselves. Since each woman is unique, try different speeds to see what suits you best.

VibesFlow Technology—Vibrate when pumping, Ensure efficient milk extraction while maintaining comfort. One highlights of this breast pump is that it adopts VibesFlow micro-vibration tech, which means the breast pump can vibrate at the same time to loosen the ducts when pumping. When the breast pump is working, it will stimulate the muscles and nerves around the breasts through micro-vibration massage to relieve the feeling of breast swelling and pain. At the same time, VibesFlow tech can promote blood circulation, so that mothers can feel more comfortable in the process of milking.

HOW TO CHOOSE MODE

Based on professional research and study, electric breast pump uses two-stage milk suction mode to stimulate the true rhythm that is closest to the baby's suction. There are four different modes and nine levels of suction. The intensity of suction increases with each level increasing.

 **Multitronic Mode:** Variable frequency to get **MORE** milk.

 **Massage Mode:** Gentle **STIMULATION** to get milk flow.

 **Suck Simulate Mode:** Simulate **NATURAL SUCKING** of baby.

 **Express Mode:** Slow and deep sucking to **EMPTY OUT**.

1 Min Massage Mode → Suck Simulate Mode “  ” → “  ”	Painless Pumping for Daily Use
1 Min Massage Mode → Express Mode “  ” → “  ”	Express Pumping for A Tight Schedule
1 Min Multitronic Mode → Express Mode “  ” → “  ”	Exclusive Combination for Oversupplyer
↓ ↓ ↓ There is a SPECIAL INGREDIENT for new moms who cannot produce much breastmilk at the beginning. Please relax yourself then try this combination below. ↓ ↓ ↓	
1 Min Massage Mode → 1 Min Multitronic Mode → Express Mode “  ” → “  ” → “  ”	Try it with a comfortable suction level

* How to use:

1. Ensure all parts of the breast pump were sterilized and installed correctly.
2. Please wash your hands and use a hot wet towel to massage your breast before use.
3. Press the flange firmly against the breast, leave no gaps and make sure your nipples are centered.
4. Keep it upright. Be careful not to distort the position of the product and the chest, otherwise the breast pump will have no suction.
5. Long press the power button to start. Choose the suction that makes you comfortable.

* Tips:

We suggest moms to try different modes and suction according to your actual breastfeeding situation.

Note:

This breast pump will automatic turn off after working 30 minutes.




TROUBLE SHOOTING

Too little or no suction

- A. Check whether diaphragm and diaphragm upper cover are sealed.
- B. Check whether the Flange at the bell mouth is installed in place.
- C. Check whether the Silicone duckbill valve is installed correctly and whether it is tilted.
- D. Check whether the connection parts between Air tube and host have been installed.
- E. Check whether the Air tube is twisted or pressed.
- F. Check whether the Air tube is loose at both ends with the main connector. If it is easy to fall off, cut off the loose Air tube and plug in the main connector to use it. After cleaning and disinfection of this diaphragm, it must be dried before use. Do not clean and disinfect Air tube (this tube is a snorkel and does not contact with breast milk).



When pumping, you should keep right posture, please do not lie on side in case of milk flows back.

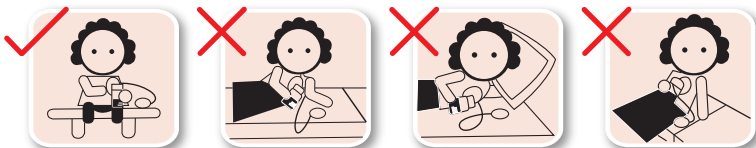

CAUTIONS

1. Please read the manual carefully before use.
2. Please fully charge the product before first use. Do not charge the battery pack for long time. Lithium batteries can only be replaced by or authorized service providers, and replacing the wrong model battery will have explosion dangers. Dispose the waste battery packs under local laws and regulations.
3. If the product is not used for a long time, the battery will run out of power. It needs to be plugged in for reactivation. After plugging in the power, wait for ten minutes for the screen to light up to indicate that it has been activated. Then continue charge the product till fully charged. If it is not activated for more than half an hour, please consult customer service.
4. The pump motor and other electric parts CAN NOT be washed in water or sterilized into steam sterilizer.
5. It is recommended not to disinfect the air tube and upper cover. If it is dirty, clean it and dry the inner and outer of the air tube. Make sure that there is no water droplets in the air tube before continuing to use breast pump. If there are water droplets in air tube, water droplets will be sucked into the motor, which will cause damage to the motor.
6. Please use the charging cable provided with this product. Do not plug the charging cable of any other manufacturer into the motor for use, so as not to cause damage to the motor.
7. Please use adapter, select the adapter with input voltage AC100~240V and output DC 5V and 3A.

Warning:

Please keep pump body, diaphragm, upper cover, air tube and other components dry to prevent the motor damaged from inhaling water!



POWER SUPPLY

Adapter: Insert the adapter into the power socket, long press power button to turn it on, choose mode and suction level. Short press power button to turn it off.

Lithium battery: This product has a lithium battery inside. When using it, long press power button to turn it on, choose mode and suction level. Short press power button to turn it off. When the battery symbol flashes, it means The power is low, please charge it in time.


CHARGING

When charging, pump should be turned off first. It will not be charging when turned on. Please plug adapter into the power socket. During the charging, the power symbol light will be flashing. When the battery symbol is stable bright, the battery is full.



Connect the charging cable to the USB port on the pump motor. breast pump includes an USB cable and can be charged by following ways:

1. Electric AC Adapter (input: AC100~240V/50Hz~60Hz; Output: DC5V/3A);
2. USB Power Bank (Output: DC5V/3A).

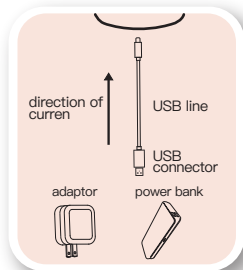

STORING BREAST MILK

Breast milk should be sealed and stored in refrigerator for long time storage.

Storage Ways	Storage Temperature	Longest Storage Time
Room	19°C~26°C	4~6 Hours
Refrigerator	<4°C/39.2°F	3~8 Days
Freezer	-15°C	14 Days
	-18°C	3~6 Months
	-20°C	3~6 Months

TO WARM MILK

1. In order to preserve the nutrition of the breast milk, you can warm the breast milk with 40°C/104°F warm water or use a bottle warmer.
2. Do not thaw frozen breast milk in the microwave oven or the boiling water (will damage the nutrition of breast milk).

WORKING CONDITION

Rated temperature range: 5°C/41°F to 40°C/104°F

Rated relative humidity: 20% ~ 80%

Rated atmospheric Pressure: 850Hpa ~ 1060Hpa

Long-term storage should be kept in a dry and cool place

TRANSPORT & STORAGE CONDITION

Temperature: -20°C/-4°F to 55°C/131°F

Humidity: 20% ~ 80%

Atmospheric pressure: 850Hpa ~ 1060Hpa

SAFETY CLASSIFICATION

properly dispose of the device in accordance with local, state and federal regulations Safety Classification.

—Type of protection against electric shock: Internally powered equipment.

—Degree of protection against electric shock: Type BF applied part.

—Safety degree of using in flammable anesthetic gas blending with air, oxygen or nitrous oxide: Non-AP/APG.

—Continuous or Non-continuous operation: Continuous.

—Classification of sterilization methods: No need for sterilization.

Symbol



Type BF
applied part



Stand by



Caution

PRODUCT SPECIFICATIONS

Name	Electric Double Breast Pump	Model	AM8132-1	Battery Specification	3.7 V 4400 mAh
Voltage	5V	Quantity	1pc		
Power	11W	Place of Origin	China	Warranty Time	1 year

WARRANTY CARD

Thank you for purchasing our product. Please keep your receipt as proof of purchase for any warranty claim.

Battery and motor can only be replaced by authorized party.

If you have any question,
please email us at lucinababy_amzus@hotmail.com.

Name		Telephone	
Product Name		Model	
Purchasing Date			
Address			

NOTICE

- 1.This product comes with 1 YEAR warranty. Please contact the MANUFACTURER for warranty claims.
- 2.This warranty does not cover defects caused by: misuse, abuse, improper storage/alteration of the product, use of improper components, failure to comply with the operating instructions using the accessories supplied with the product, or normal wear and tear.
- 3.The user of this product assumes all responsibility and risk for the use of this product.
- 4.WARNING: No modification of this equipment is allowed.

Jiangsu Xinbei Electrical Appliances Co., Ltd.



No. 115 Xinjin Road, Xinwu District,
Wuxi City, Jiangsu Province, China.

E-mail: lucinababy_amzus@hotmail.com

Please read the manual carefully before use.


Please store the product where children can not reach.





Extractor de Leche Eléctrico doble

— Manual de Usuario —

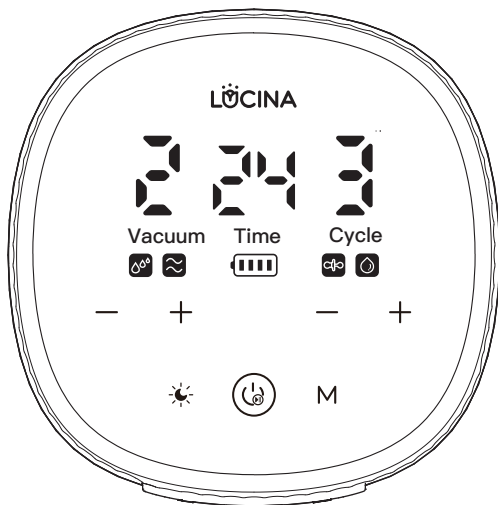

Pantalla LED · Selector de cuatro modos ·
Diseño anti reflujo · Batería de litio

COMPONENTES

Compruebe los siguientes accesorios antes de utilizarlos, si faltan piezas o están dañadas, póngase en contacto con el proveedor.

	Nombre del Componente	Materiales	Temperatura de Operación	Instrucciones de Esterilización
(a)	Tapa superior	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Enjuague en agua/debe secarse antes de usar
(b)	Diafragma	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	
(c)	Cuerpo de la bomba	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Apto para agua hirviendo/microondas/lavavajillas/UV
(d)	Brida de (24 mm)	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	REnjuague en agua/debe secarse antes de usar
		PS	-40°C/-40°F~149°C/300°F	
(e)	Inserto de brida de (17/19/21mm)	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	Enjuagar en agua/No apto para esterilización prolongada
(f)	Válvula de pico de pato de silicona	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	
(g)	Tapa de la botella	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Agua hirviendo/Microondas/Lavavajillas/UV seguro
(h)	Boquilla	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	Enjuagar en agua/No apto para esterilización prolongada
(i)	Tapa roscada	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Agua hirviendo/Microondas/Lavavajillas/UV seguro
(j)	Botella	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	
(k)	Motor	/	/	Limpie con un plumero suave
(l)	Conector	/	/	
(m)	Tubo de aire	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	
(n)	Cable de carga	/	/	




CÓMO MONTAR


Antes de utilizarlo, asegúrese de que sus manos y el extractor están limpios.




1. Empuje la válvula de pico de pato de silicona sobre el cuerpo de la bomba.

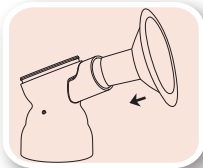

2. Fije la brida en el cuerpo de la bomba.

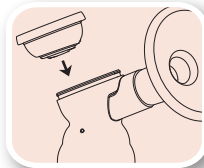


3. Coloque el diafragma en el cuerpo de la bomba.

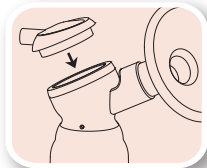


4. Enrosque la tapa del diafragma en el cuerpo de la bomba.




5. Enrosque la botella en el cuerpo de la bomba.

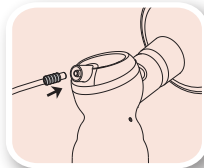

6. Conecte ambos extremos del tubo de aire con el conector del tubo. Inserte un extremo del conector en la tapa del diafragma.

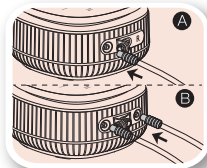

7. extractor de leche simple extractor de leche doble Selector de lado simple/doble: (A) inserte un tubo en un lado y bloquee el otro lado para utilizar la bomba simple; (B) inserte los tubos en ambos lados para utilizar la bomba doble. (Nota: Asegúrese de que el conector del tubo de aire está correcta y completamente insertado en el motor)

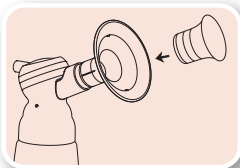

8. El inserto de brida 17/19/21 sólo es adecuado para bridas de 24 mm. Utilice una regla o una tarjeta de medida de boquilla para encontrar el tamaño correcto de la brida.



9. Después de finalizar la extracción, guarde la leche materna en el frigorífico y mantenga secas las piezas eléctricas.


No llene el biberón con demasiada leche, no puede superar la capacidad máxima del biberón. Si hay demasiada leche, se reducirá debido a la porosidad bilateral del cuerpo de la bomba. Encienda la máquina y deje de chupar, sustituya el biberón para seguir aspirando. Si encuentra que su botella pasa la corriente, reemplace la botella más grande.

Para mayor comodidad, hemos incluido en el paquete 2 copas adicionales. Y la siguiente parte ilustra los componentes y procedimientos de montaje de los de las copas equipadas.

COMPONENTES DE LAS COPAS WEARABLES

Compruebe los siguientes accesorios antes de utilizarlos, si faltan piezas o están dañadas, póngase en contacto con el proveedor.

	Nombre del Componente	Materiales	Temperatura de Operación	Instrucciones de Esterilización
Ⓐ	Inserto de brida de (21/24mm)	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	Enjuague en agua/debe secarse antes de usar
Ⓑ	Escudo mamario (28mm)	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Agua hirviendo/Microondas/Lavavavajillas/ UV seguro
		PS	-20°C/-4°F~149°C/300.2°F	
Ⓒ	Válvula de pico de pato de silicona	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	Enjuagar en agua/No apto para esterilización prolongada
Ⓓ	Vaso de recogida (150mL/5oz)	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Agua hirviendo/Microondas/Lavavavajillas/ UV seguro
		PS	-20°C/-4°F~149°C/300.2°F	
Ⓔ	Diafragma	Silicone	-20°C/-4°F~200°C/392°F	Enjuagar en agua/No apto para esterilización prolongada
Ⓕ	Portada	PP	-20°C/-4°F~120°C/248°F	Limpie con un plumero suave

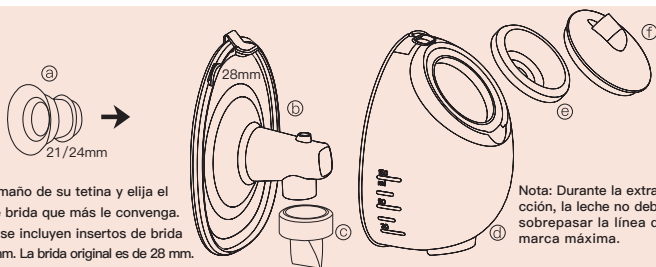


CÓMO MONTAR LAS COPAS PORTÁTILES


Antes de usar asegúrese de que sus manos y todas las partes del extractor de leche estén limpias y secas.




Vídeo de instalación

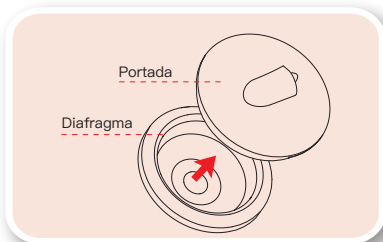


1. Coloque el diafragma en la cubierta superior, asegúrese de que no hay fugas de aire

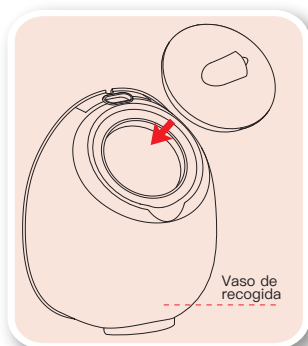


2. Presione la cubierta superior instalada sobre el vaso colector para asegurarse de que encaja en su sitio.

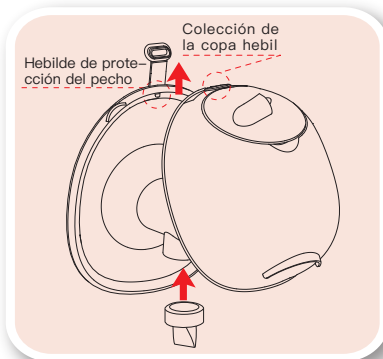

3. Empuje la válvula de pico de pato de silicona sobre el protector mamario. Abroche el protector mamario y el recipiente de recogida en la parte superior.

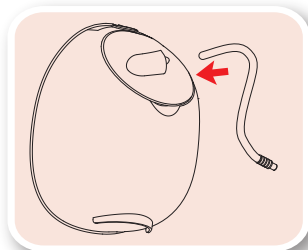

4. Un extremo sin el conector del tubo se introduce en el vaso colector, mientras que el otro extremo con conector se introduce en el motor.

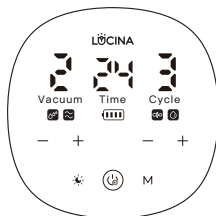

Instrucciones de uso de los botones

	Botón de encendido/apagado	Mantenga presionado para encender / bajar. Pulse brevemente para hacer una pausa. La bomba se apagará automáticamente después de una pausa de más de 10 minutos.
M	Botón de cambio de modo	Modo multitónico predeterminado "M" cuando el dispositivo se enciende cada vez. Presione brevemente para cambiar de modo.
	Luz nocturna	Cuando encienda el dispositivo, pulse brevemente para encender la luz/o.
- +	Ajuste de potencia de succión (izquierda)	1 a 9 niveles para ajustar
	Ajuste de frecuencia del ciclo (derecha)	1 a 5 niveles para ajustar

Instrucciones de visualización

	Símbolo de poder	"" El símbolo de parpadeo significa que los productos deben cargarse lo antes posible. El dispositivo se apagará automáticamente cuando la energía sea demasiado baja. El símbolo se iluminará uno por uno mientras se carga. Los tres símbolos que se mantienen brillantes significan que la carga ha finalizado y la energía está completa.
 Vacuum	Indicador de nivel	Niveles 1 a 9
 Time	Visualización de la hora	El dispositivo se apagará automáticamente cuando funcione durante 30 minutos.
 Cycle	Indicador de ciclo	Niveles 1 a 5
	Modo Multitronic	Frecuencia variable para obtener MÁS leche.
	Modo Masaje	ESTIMULACIÓN suave para que la leche fluya.
	Modo de Simulación	Simula la SUCCIÓN NATURAL del bebé.
	Modo Exprés	Chupada lenta y profunda hasta VACIARSE .

FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS

El nivel de vacío y la velocidad del ciclo pueden ajustarse independientemente pulsando el botón “ — + ” en la pantalla del motor.

Hay dos grupos de “ — + ” botones en la pantalla.

El de la izquierda sirve para ajustar el nivel de vacío y el de la derecha para ajustar la velocidad del ciclo.

Ajuste de la succión de vacío—Ajuste el nivel de vacío pulsando el botón “ — + ” en el lado izquierdo del motor.

El nivel de succión de vacío describe la agresividad con la que el sacaleches “succiona”; un número más alto indica más vacío. Tenga cuidado al ajustar el nivel de vacío de este extractor de leche. El extractor tiene entre 1 y 9 niveles de vacío. Algunas mujeres consideran que los niveles de vacío más altos aceleran la extracción de leche. Es aconsejable que empiece con un nivel de vacío bajo y lo aumente gradualmente hasta un nivel que le resulte cómodo, ya que es fundamental evitar ajustar el nivel de vacío tan alto que le cause molestias, ya que esto puede afectar al flujo de leche. Es posible que descubra que el nivel de vacío con el que se siente cómoda varía mucho de un día para otro, a lo largo del día, e incluso durante la misma sesión de extracción.

Ajuste de la velocidad del ciclo—Ajuste la velocidad del ciclo pulsando el botón “ — + ” en el lado derecho del motor.

La velocidad del ciclo se mide en CPM (ciclos por minuto) en su extractor de leche y se refiere al número de veces que el extractor “succiona” y libera por minuto. Este sacaleches se ha diseñado con 1–5 velocidades de ciclo para que pueda encontrar el ajuste que mejor se adapte a su cuerpo. que mejor se adapte a su cuerpo. Para algunas mujeres, modificar la velocidad del ciclo puede tener un impacto significativo en su capacidad de extracción. Puesto que cada mujer es única, pruebe diferentes velocidades para ver cuál se adapta mejor a usted.

Tecnología VibesFlow—vibra durante la extracción para garantizar una extracción eficaz de la leche sin renunciar a la comodidad.

Uno de los aspectos más destacados de este sacaleches es que adopta la tecnología de microvibración VibesFlow, lo que significa que el sacaleches puede vibrar al mismo tiempo para aflojar los conductos durante la extracción. Cuando el sacaleches está funcionando, estimulará los músculos y nervios alrededor de los pechos a través de un masaje de micro-vibración para aliviar la sensación de hinchazón y dolor en los pechos. Al mismo tiempo, la tecnología VibesFlow puede promover la circulación sanguínea, para que las madres puedan sentirse más cómodas en el proceso de ordeño.

CÓMO ELEGIR EL MODO

Basado en investigaciones y estudios profesionales, el extractor de leche eléctrico utiliza un modo de succión de leche de dos etapas para estimular el ritmo real más cercano a la succión del bebé. Hay cuatro modos diferentes y nueve niveles de succión. La intensidad de la succión aumenta con cada nivel.

 **Modo Multitronic:** Frecuencia variable para obtener **MÁS** leche.

 **Modo Masaje:** ESTIMULACIÓN suave para que la leche fluya.

 **Modo de Simulación:** Simula la **SUCCIÓN NATURAL** del bebé.

 **Modo Exprés:** Chupada lenta y profunda hasta **VACIARSE**.

1 Min Modo Masaje → Modo de Simulación de Succión “  ” → “  ”	Bombeo indoloro para uso diario
1 Min Modo Masaje → Modo Exprés “  ” → “  ”	Extracción exprés para una agenda apretada
1 Min Modo Multitronic → Modo Exprés “  ” → “  ”	Combinación exclusiva para Oversupplier
↓ ↓ ↓ Hay un INGREDIENTE ESPECIAL para las nuevas mamás que no pueden producir mucha leche materna al principio. Relájese y pruebe esta combinación. ↓ ↓ ↓	
1 Min Modo Masaje → 1 Min Modo Multitronic → Modo Exprés “  ” → “  ” → “  ”	Pruébalo con un nivel de succión cómodo

* Cómo se usa:

1. Asegúrese de que todas las piezas del sacaleches fueron esterilizadas e instaladas correctamente.
2. Por favor, lávese las manos y utilice una toalla húmeda y caliente para masajear el pecho antes de usarlo.
3. Presione la brida firmemente contra el pecho, no deje huecos y asegúrese de que sus pezones están centrados.
4. Manténgalo en posición vertical. Tenga cuidado de no distorsionar la posición del producto y el pecho, de lo contrario el sacaleches no tendrá succión.
5. Pulsa prolongadamente el botón de encendido para ponerlo en marcha. Elija la succión que le resulte más cómoda.

* Consejos:

Sugerimos a las mamás que prueben diferentes modos y succión según su situación real de lactancia.

Nota:

Este extractor de leche se apagará automáticamente después de funcionar 30 minutos.




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Muy poca o ninguna succión

- A. Compruebe si el diafragma y la cubierta superior del diafragma están sellados.
- B. Compruebe si la brida de la boca de la válvula está instalada en su sitio.
- C. Compruebe si la válvula de pico de pato de silicona está instalada correctamente y si está inclinada.
- D. Compruebe si las piezas de conexión entre el tubo de aire y el motor están instaladas.
- E. Compruebe si el tubo de aire está torcido o presionado.
- F. Compruebe si el tubo de aire está suelto en ambos extremos con el conector principal. Si se cae fácilmente, quite el tubo de Aire suelto y enchufe el conector principal para utilizarlo. Después de limpiar y desinfectar el diafragma, debe secarlo antes de utilizarlo. No limpie ni desinfecte el tubo de Aire (este tubo es un tubo de respiración y no entra en contacto con la leche materna)



Al extraer leche, debe mantener la postura correcta; no se acueste de lado en caso de que la leche regrese.

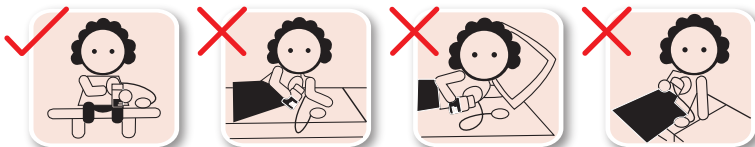

PRECAUCIONES

1. Lea atentamente el manual antes de utilizarlo.
2. Cargue completamente el producto antes de utilizarlo por primera vez. No cargue la batería durante mucho tiempo. Las baterías de litio sólo pueden ser sustituidas por o proveedores de servicio autorizados, y la sustitución de la batería de un modelo incorrecto entrañará peligros de explosión. Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con las leyes y normativas locales.
3. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, la batería se agotará. Es necesario cargarla para reactivarla. Después de enchufarlo, espere diez minutos a que se encienda la pantalla para indicar que se ha activado. A continuación, siga cargando el producto hasta que esté totalmente cargado. Si no se activa durante más de media hora, consulte al servicio de atención al cliente.
4. El motor de la bomba y otras piezas eléctricas NO PUEDEN lavarse con agua ni esterilizarse en un esterilizador de vapor.
5. Se recomienda no desinfectar el tubo de aire ni la cubierta superior. Si está sucio, límpielo y seque el interior y el exterior del tubo de aire. Asegúrese de que no hay gotas de agua en el tubo de aire antes de seguir utilizando el extractor. Si hay gotas de agua en el tubo de aire, las gotas de agua serán aspiradas por el motor, lo que provocará daños en el motor.
6. Por favor, utilice el cable de carga suministrado con este producto. No enchufe el cable de carga de otro fabricante para utilizarlo, para no causar daños al motor.
7. Por favor use el adaptador, seleccione el adaptador con voltaje de entrada AC100–240V y salida DC 5V y 3A.

Advertencia:

Mantenga secos el cuerpo de la bomba, el diafragma, la cubierta superior, el tubo de aire y otros componentes para evitar que el motor se dañe por la inhalación de agua!



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Adaptador: inserte el adaptador en la toma de corriente, mantenga presionado el botón de encendido para encenderlo, elija el modo y el nivel de succión. Presione brevemente el botón de encendido para apagarlo.

Batería de litio: este producto tiene una batería de litio en su interior. Cuando lo utilice, mantenga presionado el botón de encendido para encenderlo, elija el modo y el nivel de succión. Presione brevemente el botón de encendido para apagarlo. Cuando el símbolo de la batería parpadea, significa que la energía es baja, cárguela a tiempo.

CARGANDO


Al cargar, la bomba debe apagarse primero. No se cargará cuando esté encendido. Conecte el adaptador a la toma de corriente. Durante la carga, la luz del símbolo de encendido parpadeará. Cuando el símbolo de la batería tiene un brillo estable, la batería está llena.



Conecte el cable de carga al puerto USB del motor del extractor.

El extractor de leche incluye un cable USB y puede cargarse de las siguientes formas:

1. Adaptador eléctrico de CA (entrada: AC100–240V/50Hz–60Hz; salida: DC5V/3A);
2. Banco de energía USB (salida: DC5V/3A).

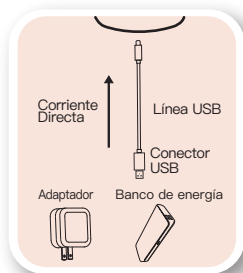

ALMACENAMIENTO DE LA LECHE MATERNA

La leche materna debe sellarse y almacenarse en el refrigerador para un almacenamiento prolongado.

Formas de almacenamiento	Temperatura de almacenamiento	Mayor tiempo de almacenamiento
Habitación	19°C~26°C	4~6 horas
Refrigerador	<4°C/39.2°F	3~8 días
Congelador	-15°C	14 días
	-18°C	3~6 meses
	-20°C	3~6 meses

PARA CALENTAR LA LECHE

1. Para preservar la nutrición de la leche materna, puede calentar la leche materna con agua tibia a 40°C/104°F o usar un calentador de biberones.
2. No descongele la leche materna congelada en el horno microondas ni en agua hirviendo (dañará la nutrición de la leche materna).

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Rango de temperatura nominal: 5°C/41°F a 40°C/104°F

Humedad relativa nominal: 20%–80%

Presión atmosférica nominal: 850Hpa – 1060Hpa

El almacenamiento a largo plazo debe mantenerse en un lugar seco y fresco

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Temperatura: –20°C/–4°F a 55°C/131°F

Humedad: 20% – 80%

Presión atmosférica: 850Hpa – 1060Hpa

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD

Deseche el aparato de acuerdo con la normativa local, estatal y federal Clasificación de seguridad.

- Tipo de protección contra descargas eléctricas: Equipo alimentado internamente.
- Grado de protección contra descargas eléctricas: Tipo BF parte aplicada.
- Grado de seguridad de uso en mezcla de gas anestésico inflamable con aire, oxígeno u óxido nítrico: No–AP/APG.
- Funcionamiento continuo o no continuo: Continuo.
- Clasificación de los métodos de esterilización: Sin necesidad de esterilización.

Símbolo



Tipo BF parte
aplicada



En espera



Precaución

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre	Extractor de Leche Eléctrico Doble	Modelo	AM8132–1	Especificación de la batería	3,7 V 4400 mAh
Tensión	5V	Cantidad	1pc		
Potencia	11W	Lugar de origen	China	Tiempo de garantía	1 year

TARJETA DE GARANTÍA

Gracias por comprar nuestro producto. Por favor, guarde su recibo como prueba de compra para cualquier reclamación de garantía.

La batería y el motor solo pueden ser reemplazados por una fiesta autorizada.

Si tiene alguna pregunta,

Envíenos un correo electrónico a Lucinababy_amzus@hotmail.com.

Nombre		Teléfono	
Nombre de Producto		Modelo	
Fecha de Compra			
Dirección			

AVISO

1. Este producto tiene 1 AÑO de garantía. Por favor, póngase en contacto con el FABRICANTE para los reclamos de garantía.
2. Esta garantía no cubre los defectos causados por: mal uso, abuso, almacenamiento/alteración incorrecta del producto, uso de componentes inadecuados, incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento utilizando los accesorios suministrados con el producto, o desgaste normal.
3. El usuario de este producto asume toda la responsabilidad y el riesgo por el uso de este producto.
4. ADVERTENCIA: No se permite la modificación de este material.

Jiangsu Xinbei Electrodomésticos Co., Ltd.

 No. 115 Xinjin Road, distrito de Xinwu, ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu, China.
CORREO ELECTRÓNICO:
lucinababy_amzus@hotmail.com



Lea atentamente el manual antes de utilizar el aparato.
Por favor, guarde el producto donde los niños no puedan alcanzarlo.

C-1